

Zbiornik na insulinę



REF MTM-3

Microtech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 108 Liuzhe St., Cangqian, Yuhang District,
Hangzhou, 311121 Zhejiang, Chiny
www.microtechmd.com

CMC Medical Devices & Drugs S.L
C/Horacio Lengo N° 18 CP 29006,
Málaga-Spain

Importer:
Synoptis Industrial Sp. z o.o.
ul. Forteczna 35-37
87-100 Toruń

1001-PMTL-272. V04

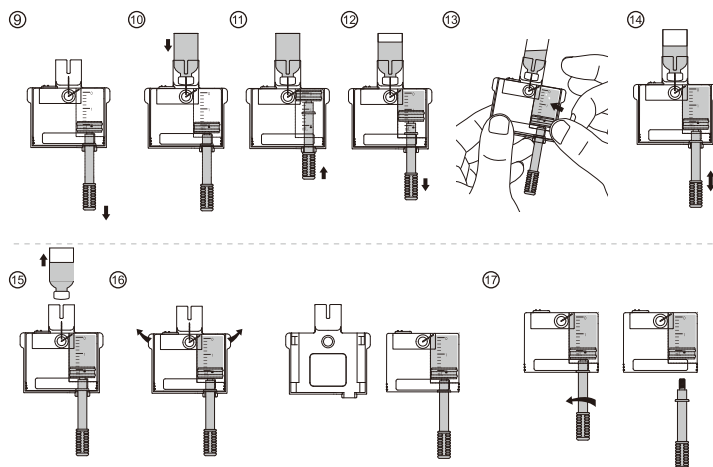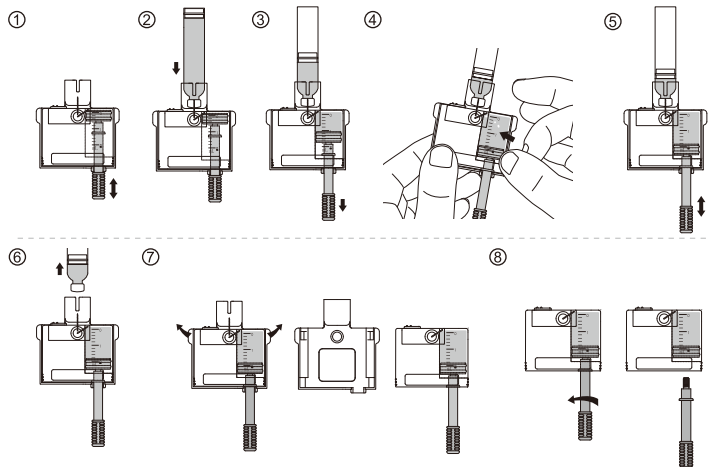

PL Polski

Nazwa produktu: Zbiornik na insulinę
REF: MTM-3

Okres trwałości: 3 lata

Data produkcji: należy sprawdzić na opakowaniu


1. Przeznaczenie

Zbiornik na insulinę marki Equil jest częścią Mikro pompy insulinowej marki Equil i służy do przechowywania insuliny. Sterylny Zbiornik na insulinę powinien być używany z Mikro pompą insulinową marki Equil i jednorazowym Zestawem infuzyjnym wyprodukowanym przez MicroTech Medical.

2. Komponenty

Opakowanie Zbiornika na insulinę zawiera zbiornik, złącze do napełniania i tłoczek, co pokazano na rysunku.

złącze do napełniania

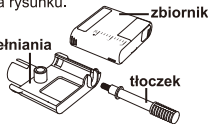

Całkowita pojemność zbiornika wynosi 2,0 ml, co jest równe 200 jednostkom insuliny U-100.

3. Wskazania

Wyrób służy do podskórnego podawania insuliny przy użyciu Mikro pompy insulinowej marki Equil (MTM-1).

4. Przeciwwskazania

1. Używać tylko z insuliną U-100.
2. Nie używać do przechowywania lub infuzji krwi lub wyrobów krwiopochodnych.

5. Zastosowanie

Wyrób jest kompatybilny z Mikro pompą insulinową marki Equil i jest odpowiedni do leczenia cukrzycy, która wymaga zastosowania krótko lub długoterminowej terapii przy użyciu pompy insulinowej.

6. Sposób użycia

Zbiornik do fiolek z insuliną o pojemności 3 ml:
1. Wyjąć nowy zbiornik z opakowania.

2. Pociągnąć tłoczek w dół by napełnić zbiornik powietrzem, a następnie przesunąć tłoczek do góry zgodnie z wskazaniem strzałki. Powtórzyć tę czynność trzykrotnie, aż tłoczek znajdzie się we wskazanej pozycji (Rysunek 1).
3. Wytrzeć górną część fiołki z insuliną gazikiem nasączonym alkoholem, a następnie zamocować fiołkę w złączu do napełniania (Rysunek 2).
4. Trzymając fiołkę z insuliną dnem skierowanym ku górze wprowadzić igłę do fiołki, powoli pociągnąć za tłoczek i pobrać insulinę do zbiornika (Rysunek 3).
5. Aby usunąć pęcherzyki powietrza, należy trzymając zbiornik pod kątem kilkakrotnie, delikatnie postukać w niego palcem (Rysunek 4).
6. Wcisnąć powoli tłoczek zgodnie ze strzałką w górę, aby wypchnąć pęcherzyki powietrza ze zbiornika. Następnie powoli pociągnąć tłoczek zgodnie ze strzałką w dół, aż zbiornik będzie ponownie napełniony odpowiednią ilością insuliny (Rysunek 5.).
7. Wyjąć fiołkę z insuliną ze złącza do napełniania (Rysunek 6).
8. Pociągnąć dwa zatrzaski zwalniające w kierunku od zbiornika, aby zwolnić złącze do napełniania (Rysunek 7).
9. Wyjąć tłoczek poprzez odkręcenie go w kierunku odwrotnym niż kierunek ruchu wskazówek zegara (Rysunek 8).

Zbiornik do fiolek z insuliną o pojemności 10 ml:

1. Wyjąć nowy zbiornik z opakowania.
2. Pociągnij tłoczek do wskazanej pozycji, aby napełnić zbiornik powietrzem (Rysunek 9).
3. Wytrzeć górną część fiołki z insuliną gazikiem nasączonym alkoholem, a następnie zamocować fiołkę w złączu do napełniania (Rysunek 10).
4. Trzymając fiołkę z insuliną dnem skierowanym ku górze, wprowadzić igłę do fiołki i wstrzyknąć powietrze co ułatwi pobranie insuliny (Rysunek 11).
5. Powoli pociągnąć tłoczek w dół zgodnie ze wskazaniem strzałki i pobrać insulinę do zbiornika (Rysunek 12).
6. Opukać palcem bok zbiornika, aby ewentualne pęcherzyki powietrza uniosły się do góry (Rysunek 13).

7. Wcisnąć powoli tłoczek, aby wypchnąć pęcherzyki z powrotem do fiołki, a następnie powoli pociągnąć tłoczek, aby pobrać więcej insuliny do zbiornika. Powtarzać tę czynność, aż zbiornik będzie całkowicie napełniony insuliną, bez widocznych pęcherzyków powietrza (Rysunek 14).
8. Wyjąć fiołkę z insuliną ze złącza do napełniania (Rysunek 15).
9. Odkręcić zbiornik od złącza do napełniania (Rysunek 16).
10. Wyjąć tłoczek poprzez odkręcenie go w kierunku odwrotnym niż kierunek ruchu wskazówek zegara (Rysunek 17).

7. Ostrzeżenia

Zbiornik jest jednorazowym, apirogenicznym wyrobem sterylnym. Sterylizacja została przeprowadzona przy użyciu tlenu etylenowego. Nie należy używać powtórnie ani dezynfekować. Nie używać jeśli opakowanie zostało wcześniej otwarte lub jest uszkodzone. Należy używać wyłącznie zbiorników wyprodukowanych przez MicroTech Medical.

Złącze do napełniania należy utylizować do przeznaczonych do tego pojemników.

Nadmiar powietrza w zbiorniku może powodować niedokładne podawanie insuliny. Ze zbiornika należy wypuścić możliwie dużo pęcherzyków powietrza.

Wyrób powinien być wymieniany co trzy dni.

8. Uwagi

Insulina powinna mieć temperaturę pokojową przed napełnieniem zbiornika.

Wyrób należy zastosować bezpośrednio po napełnieniu. Nie należy przechowywać insuliny w zbiorniku jeśli wyrób nie jest używany.

Wyrób powinien być stosowany pod nadzorem lekarza lub innego profesjonalisty medycznego. Może być on stosowany w domu lub w warunkach szpitalnych po odpowiednim przeszkoleniu. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem powinieneś przygotować swój pierwszy zbiornik przy wsparciu lekarza.

Przed użyciem wyrobu należy bardzo dokładnie przeczytać tę ulotkę i przestrzegać instrukcji w niej zawartych. Należy przeczytać także

instrukcję Mikro pompy insulinowej oraz instrukcję Zestawu infuzyjnego.

9. Warunki przechowywania

Produkt powinien być przechowywany w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od gazów korozyjnych. Należy unikać jego przechowywania w pobliżu środków dezynfekcyjnych zawierających chlor.

10. Użyte symbole



Jednorazowego użytku	
Uwaga	
Data ważności	
Kod partii	
Sterylnie w opakowaniu	
Zajrzyj do instrukcji użytkownika	
Nie używaj jeśli opakowanie jest uszkodzone.	
Data produkcji	
Producent	

Microtech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 108 Liuze St., Cangqian, Yuhang District,
Hangzhou, 311121 Zhejiang, China
www.microtechmd.com

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo N° 18 CP 29006,
Málaga-Spain

Importer:
Synopsis Industrial Sp. z o.o.
ul. Forteczna 35-37
87-100 Toruń

1001-PMTL-272. V04

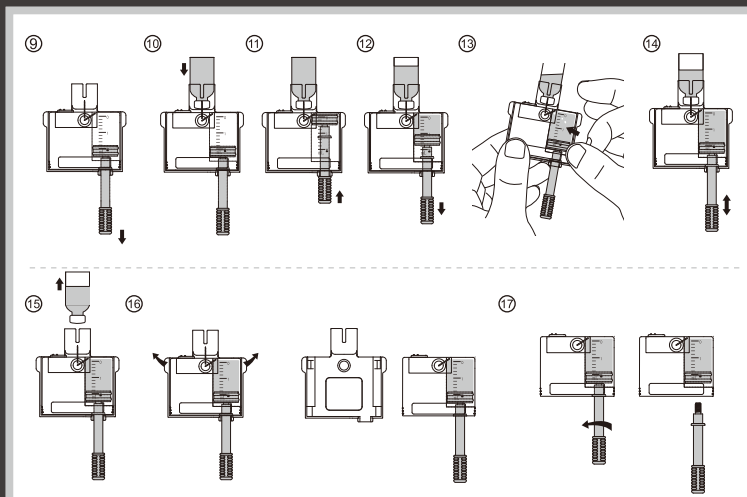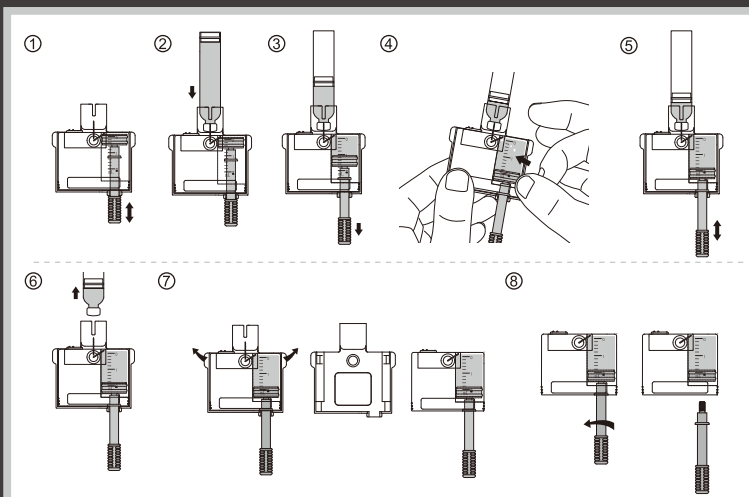

English

Product Name: Ambulatory Insulin Infusion Pump Reservoir

REF: MTM-3

Shelf Life: 3 years

Manufacturer Date: Check label on box


1. Purpose

The Equil Reservoir is a component of the Equil patch insulin pump system and is used to store insulin.

The sterilized reservoir should be used with the Equil patch pump and disposable infusion set produced by MicroTech Medical.

2. Components

The Reservoir package consists of a reservoir, fill adapter and pullrod, as shown in the figure below:

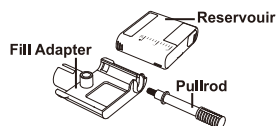

The total capacity of the reservoir is 2.0ml, which is equal to 200 units of U-100 insulin.

3. Indications

This product is indicated for the subcutaneous infusion of insulin using the Equil Patch Insulin Pump (MTM-1).

4. Contraindication

- 1 Use only with U-100 insulin.
- 2 Cannot be used for storage or infusion of blood or blood products.

5. Application

This disposable product is compatible with the Equil Patch Insulin Pump System and is suitable for treating diabetes requiring short-term or long-term insulin pump therapy.

6. Usage

The fill adapter for 3 mL insulin cartridge:

- 1 Remove the new reservoir from the packaging.
- 2 Use the pullrod to pull the piston to the full position inside the reservoir, then push it

completely to the empty position. Repeat this three times ending with the piston in the empty position (Figure 1).

- 3 Use an alcohol wipe to clean the top of the insulin vial and then attach it to the fill adapter (Figure 2).

- 4 With the insulin vial on top, insert the needle into the vial, slowly pull the pullrod and draw insulin into the reservoir (Figure 3).

- 5 Tap the side of the reservoir to encourage any air bubbles to rise to the top of the reservoir (Figure 4).

- 6 Push the pullrod slowly to eject the bubbles back into the vial, then slowly pull to draw more insulin into the reservoir. Repeat until the reservoir is filled with the required amount of insulin again (Figure 5).

- 7 Remove the insulin vial from the fill adapter (Figure 6).

- 8 Pull the two release tabs away from the reservoir to release the fill adapter (Figure 7).

- 9 Remove the pullrod by unscrewing it counterclockwise (Figure 8).

The fill adapter for 10 mL insulin vial:

- 1 Remove the new reservoir from the packaging.

- 2 Use the pullrod to pull the piston to the full position inside the reservoir (Figure 9).

- 3 Use an alcohol wipe to clean the top of the insulin vial and then attach it to the fill adapter (Figure 10).

- 4 Insert the needle into the vial and inject the air, injecting air makes it easier to withdraw insulin from the vial (Figure 11).

- 5 Slowly pull the pullrod downwards in the direction of the arrow to fill the reservoir with insulin (Figure 12).

- 6 Tap the side of the reservoir to encourage any air bubbles to rise to the top of the reservoir (Figure 13).

- 7 Push the pullrod slowly to eject the bubbles back into the vial, then slowly pull to draw more insulin into the reservoir. Repeat until the reservoir is filled with the required amount of insulin again and there are no any air bubbles (Figure 14).

- 8 Remove the insulin vial from the fill adapter (Figure 15).

- 9 Release the reservoir from the fill adapter (Figure 16).

- 10 Remove the pullrod by unscrewing it counterclockwise (Figure 17).

7. Warnings

The Reservoir is a sterile, non pyrogenic disposable product. It has been sterilized using ethylene oxide. Do not reuse or disinfect. Do not use if the package has been opened or damaged.

Please use only Reservoirs that are produced by MicroTech Medical.

Please discard the Fill Adapter in an appropriate sharps container.

Excess air in the Reservoir may cause inaccurate delivery of insulin. Eject as much air as possible.

It is suggested that the product should be changed every three days.

8. Notes

Insulin should be at room temperature before filling the Reservoir.

Use immediately after filling. Do not store insulin in the Reservoir when the Reservoir is not in use.

This product should be used under the guidance of doctors or other healthcare professionals. It can be used in a home or hospital environment after proper training. If you are a new user, you should prepare your first reservoir with professional help.

Please read this insert carefully before use and follow the directions. Read the Pump and Infusion Set user guides carefully as well.

9. Storage Condition

This product should be stored in a non corrosive gas, cool, dry, well ventilated area. Avoid storing with the chlorinated disinfectant.

10. Symbol list

Single Use Only	
Caution	
Expiration Date	
Lot Number	
Sterilized by Ethylene Oxide	
Read Instructions	
Do Not Use if Package is Damaged	
Manufacture Date	
Manufacturer	

PL Do stosowania z Mikro pompą insulinową (marki Equil)

Microtech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 108 Liuze St., Cangqian, Yuhang District,
Hangzhou, 311121 Zhejiang, China
www.microtechmd.com

CMC Medical Devices & Drugs S.L
C/Horacio Lengo Nº 18 CP 29006,
Málaga-Spain

Importer:
Synoptis Industrial Sp. z o.o.
ul. Forteczna 35-37
87-100 Toruń

1001-PMTL-272_V04

MicroTech
Medical


CE 0197



equil™

Zbiornik na insulinę

REF MTM-3

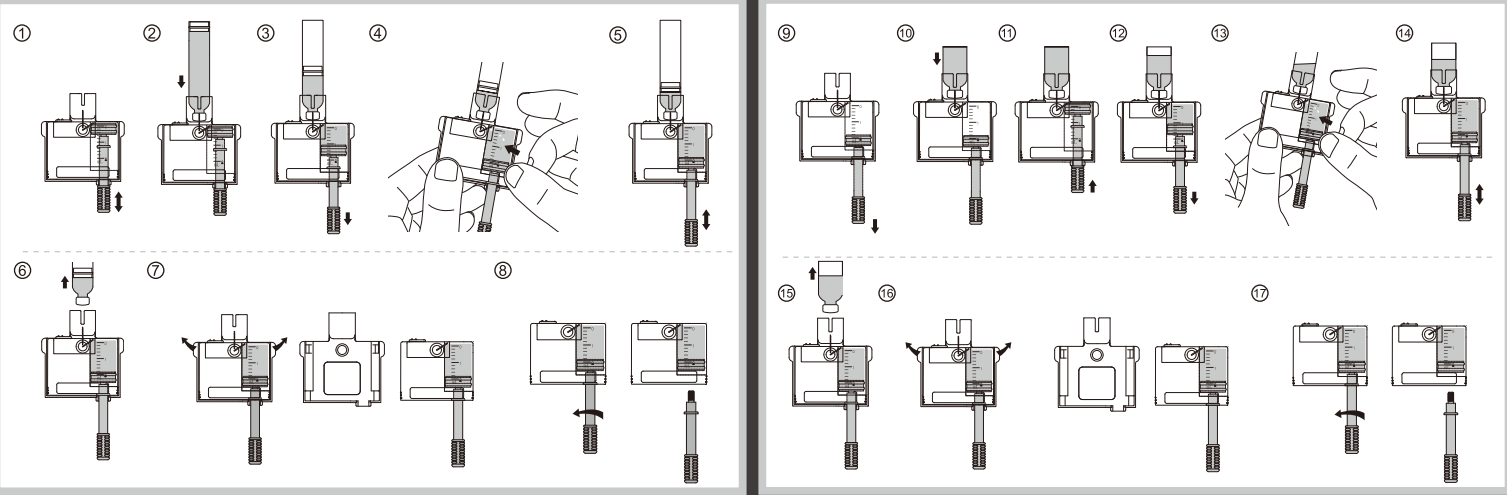

PL Polski

Nazwa produktu: Zbiornik na insulinę
REF: MTM-3
Okres trwałości: 3 lata
Data produkcji: należy sprawdzić na opakowaniu

1. Przeznaczenie

Zbiornik na insulinę marki Equil jest częścią Mikro pompy insulinowej marki Equil i służy do przechowywania insuliny. Sterylny Zbiornik na insulinę powinien być używany z Mikro pompą insulinową marki Equil i jednorazowym Zestawem infuzyjnym wyprodukowanym przez MicroTech Medical.

2. Komponenty

Opakowanie Zbiornika na insulinę zawiera zbiornik, złącze do napełniania i tłoczek, co pokazano na rysunku.



Całkowita pojemność zbiornika wynosi 2,0 ml, co jest równe 200 jednostkom insuliny U-100.

3. Wskazania

Wyrób służy do podskórnego podawania insuliny przy użyciu Mikro pompy insulinowej marki Equil (MTM-1).

4. Przeciwwskazania

- Używać tylko z insuliną U-100.
- Nie używać do przechowywania lub infuzji krwi lub wyrobów krwiopochodnych.

5. Zastosowanie

Wyrób jest kompatybilny z Mikro pompą insulinową marki Equil i jest odpowiedni do leczenia cukrzycy, która wymaga zastosowania krótko lub długoterminowej terapii przy użyciu pompy insulinowej.

6. Sposób użycia

Zbiornik do fioletu z insuliną o pojemności 3 ml:
1) Wyjąć nowy zbiornik z opakowania.

2) Pociągnąć tłoczek w dół by napełnić zbiornik powietrzem, a następnie przesunąć tłoczek do góry zgodnie z wskazaniem strzałki.

Powstrzymać tę czynność trzykrotnie, aż tłoczek znajdzie się we wskazanej pozycji (Rysunek 1).

3) Wytrzeć górną część fiolki z insuliną gazikiem nasączonym alkoholem, a następnie zamocować fiolkę w złączu do napełniania (Rysunek 2).

4) Trzymając fiolkę z insuliną dnem skierowanym ku górze wprowadzić igłę do fiolki, powoli pociągnąć za tłoczek i pobrać insulinę do zbiornika (Rysunek 3).

5) Aby usunąć pęcherzyki powietrza, należy trzymając zbiornik pod kątem kilkakrotnie, delikatnie postukać w niego palcem (Rysunek 4).

6) Wcisnąć powoli tłoczek zgodnie ze strzałką w górę, aby wypchnąć pęcherzyki powietrza ze zbiornika. Następnie powoli pociągnąć tłoczek zgodnie ze strzałką w dół, aż zbiornik będzie ponownie napełniony odpowiednią ilością insuliny (Rysunek 5).

7) Wyjąć fiolkę z insuliną ze złącza do napełniania (Rysunek 6).

8) Pociągnąć dwa zatrzaski zwalniające w kierunku od zbiornika, aby zwolnić złącze do napełniania (Rysunek 7).

9) Wyciągnąć tłoczek poprzez odkręcenie go w kierunku odwrotnym niż kierunek ruchu wskazówek zegara (Rysunek 8).

10) Wyjąć nowy zbiornik z opakowania.

11) Wytrzeć górną część fiolki z insuliną gazikiem nasączonym alkoholem, a następnie zamocować fiolkę w złączu do napełniania (Rysunek 10).

12) Trzymając fiolkę z insuliną dnem skierowanym ku górze, wprowadzić igłę do fiolki i wstrzyknąć powietrze co ułatwi pobranie insuliny (Rysunek 11).

13) Powoli pociągnąć tłoczek w dół zgodnie ze wskazaniem strzałki i pobrać insulinę do zbiornika (Rysunek 12).

14) Opukać palcem bok zbiornika, aby ewentualne pęcherzyki powietrza uniosły się do góry (Rysunek 13).

15) Wcisnąć powoli tłoczek, aby wypchnąć pęcherzyki z powrotem do fiolki, a następnie powoli pociągnąć tłoczek, aby pobrać więcej insuliny do zbiornika. Powtarzać tę czynność, aż zbiornik będzie całkowicie napełniony insuliną, bez widocznych pęcherzyków powietrza (Rysunek 14).

16) Wyjąć fiolkę z insuliną ze złącza do napełniania (Rysunek 15).

17) Odkręcić zbiornik od złącza do napełniania (Rysunek 16).

18) Wyjąć tłoczek poprzez odkręcenie go w kierunku odwrotnym niż kierunek ruchu wskazówek zegara (Rysunek 17).

7. Ostrzeżenia

Zbiornik jest jednorazowym, apirogenicznym wyrobem sterylnym. Sterylizacja została przeprowadzona przy użyciu tlenu etylenu. Nie należy używać powtórnie ani dezynfekować. Nie używać jeśli opakowanie zostało wcześniej otwarte lub jest uszkodzone. Należy używać wyłącznie zbiorników wyprodukowanych przez MicroTech Medical.

Złącze do napełniania należy użytkować do przeznaczonych do tego pojemników.

Nadmiar powietrza w zbiorniku może powodować niedokładne podawanie insuliny. Ze zbiornika należy wypuścić możliwie dużo pęcherzyków powietrza.

Wyrób powinien być wymieniany co trzy dni.

8. Uwagi

Insulina powinna mieć temperaturę pokojową przed napełnieniem zbiornika.

Wyrób należy stosować bezpośrednio po napełnieniu. Nie należy przechowywać insuliny w zbiorniku jeśli wyrób nie jest używany.

Wyrób powinien być stosowany pod nadzorem lekarza lub innego profesjonalisty medycznego. Może być on stosowany w domu lub w warunkach szpitalnych po odpowiednim przeszkoleniu. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem powinieneś przygotować swój pierwszy zbiornik przy wsparciu lekarza.

Przed użyciem wyrobu należy bardzo dokładnie przeczytać tę ulotkę i przestrzegać instrukcji w niej zawartych. Należy przeczytać także

instrukcję Mikro pompy insulinowej oraz instrukcję Zestawu infuzyjnego.

9. Warunki przechowywania

Produkt powinien być przechowywany w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od gazów korozyjnych. Należy unikać jego przechowywania w pobliżu środków dezynfekcyjnych zawierających chlor.

10. Użyte symbole

Jednorazowego użytku	☒
Uwaga	⚠
Data ważności	📅
Kod partii	LOT
Sterylizowane tlakiem etylenu	STERILIZED
Zajrzyj do instrukcji użytkowania	📖
Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone	🚫
Data produkcji	📅
Producent	🏭

EN For use with the Equil Patch Insulin Pump System

Microtech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 108 Liuze St., Cangqian, Yuhang District,
Hangzhou, 311121 Zhejiang, China
www.microtechmd.com

CMC Medical Devices & Drugs S.L
C/Horacio Lengo Nº 18 CP 29006,
Málaga-Spain

Importer:
Synoptis Industrial Sp. z o.o.
ul. Forteczna 35-37
87-100 Toruń

1001-PMTL-272_V04

MicroTech
Medical


CE 0197



equil™

Insulin Reservoir

REF MTM-3

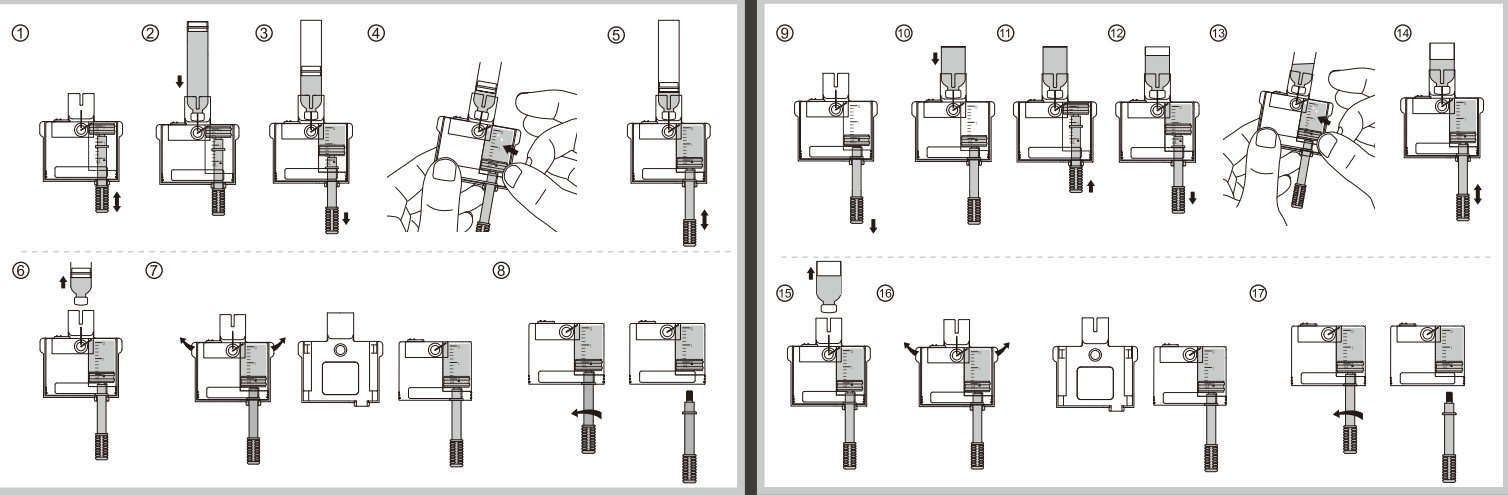

EN English

Product Name: Ambulatory Insulin Infusion Pump Reservoir
REF: MTM-3
Shelf Life: 3 years
Manufacturer Date: Check label on box


1. Purpose

The Equil Reservoir is a component of the Equil patch insulin pump system and is used to store insulin.

The sterilized reservoir should be used with the Equil patch pump and disposable infusion set produced by MicroTech Medical.

2. Components

The Reservoir package consists of a reservoir, fill adapter and plunger, as shown in the figure below:

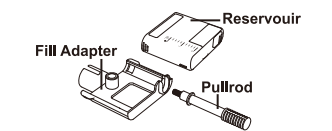

The total capacity of the reservoir is 2.0ml, which is equal to 200 units of U-100 insulin.

3. Indications

This product is indicated for the subcutaneous infusion of insulin using the Equil Patch Insulin Pump (MTM-1).

4. Contraindication

- Use only with U-100 insulin.
- Cannot be used for storage or infusion of blood or blood products.

5. Application

This disposable product is compatible with the Equil Patch Insulin Pump System and is suitable for treating diabetes requiring short-term or long-term insulin pump therapy.

6. Usage

- The fill adapter for 3 ml insulin cartridge:
 - Remove the new reservoir from the packaging.
 - Use the plunger to pull the piston to the full position inside the reservoir, then push it

completely to the empty position. Repeat this three times ending with the piston in the empty position (Figure 1).

- Use an alcohol wipe to clean the top of the insulin vial and then attach it to the fill adapter (Figure 2).

- With the insulin vial on top, insert the needle into the vial, slowly pull the plunger and draw insulin into the reservoir (Figure 3).

- Tap the side of the reservoir to encourage any air bubbles to rise to the top of the reservoir (Figure 4).

- Push the plunger slowly to eject the bubbles back into the vial, then slowly pull to draw more insulin into the reservoir. Repeat until the reservoir is filled with the required amount of insulin again (Figure 5).

- Remove the insulin vial from the fill adapter (Figure 6).

- Pull the two release tabs away from the reservoir to release the fill adapter (Figure 7).

- Remove the plunger by unscrewing it counterclockwise (Figure 8).

The fill adapter for 10 mL insulin vial:

- Remove the new reservoir from the packaging.
- Use the plunger to pull the piston to the full position inside the reservoir (Figure 9).

- Use an alcohol wipe to clean the top of the insulin vial and then attach it to the fill adapter (Figure 10).

- Insert the needle into the vial and inject the air, injecting air makes it easier to withdraw insulin from the vial (Figure 11).

- Slowly pull the plunger downwards in the direction of the arrow to fill the reservoir with insulin (Figure 12).

- Tap the side of the reservoir to encourage any air bubbles to rise to the top of the reservoir (Figure 13).

- Push the plunger slowly to eject the bubbles back into the vial, then slowly pull to draw more insulin into the reservoir. Repeat until the reservoir is filled with the required amount of insulin again and there are no any air bubbles (Figure 14).

- Remove the insulin vial from the fill adapter (Figure 15).

- Release the reservoir from the fill adapter (Figure 16).

- Remove the plunger by unscrewing it counterclockwise (Figure 17).

7. Warnings

The Reservoir is a sterile, non pyrogenic disposable product. It has been sterilized using ethylene oxide. Do not reuse or disinfect. Do not use if the package has been opened or damaged.

Please use only Reservoirs that are produced by MicroTech Medical.

Please discard the Fill Adapter in an appropriate sharps container.

Excess air in the Reservoir may cause inaccurate delivery of insulin. Eject as much air as possible. It is suggested that the product should be changed every three days.

8. Notes

Insulin should be at room temperature before filling the Reservoir.

Use immediately after filling. Do not store insulin in the Reservoir when the Reservoir is not in use.

This product should be used under the guidance of doctors or other healthcare professionals. It can be used in a home or hospital environment after proper training. If you are a new user, you should prepare your first reservoir with professional help.

Please read this insert carefully before use and follow the directions. Read the Pump and Infusion Set user guides carefully as well.

9. Storage Condition

This product should be stored in a non corrosive gas, cool, dry well ventilated area. Avoid storing with the chlorinated disinfectant.





10. Symbol list

Single Use Only	☒
Caution	⚠
Expiration Date	📅
Lot Number	LOT
Sterilized by Ethylene Oxide	STERILIZED
Read Instructions	📖
Do Not Use if Package is Damaged	🚫
Manufacture Date	📅
Manufacturer	🏭

折叠方式

外折线 ————

内折线 - - - - -

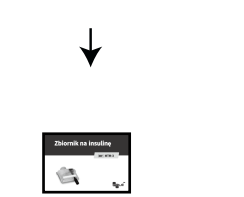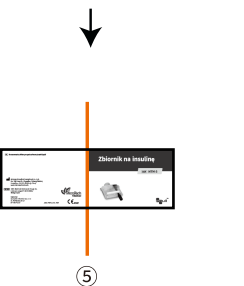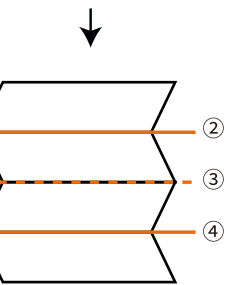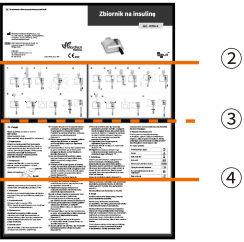

折叠后105*72mm
封面朝上

当前页/全部页码

1



本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印。

本图纸应与说明，产品状况，产品结构图及有
关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师。

图档中所有尺寸比例为1:1.
公差: L(长)*(宽): +1/-1mm,H(高): ±1mm

项目信息

名称 储药器说明书(波兰语版)

图纸号
物料号 1001-PMTL-272
版本号 V04

版本变更描述 更新欧代地址

发放范围 生产 () 采购 (√) 计划 (√) 其他:

切刀 ————

压线 ————

开槽 ————

半穿 ————

粘合 ————

备注
无印刷

尺寸: 210X285mm

印刷颜色: 黑白

材质: 70g轻涂纸

特种工艺:

备注: 正反印刷

设计审核

设计

审核

批准

生效日期

日期